




Használati útmutató HeltiQ Skintags

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! - Csak külsőleg alkalmazható - Felnöttek és 4 éven felüli gyermekek részére - A fibróma kezelése krioterápiával történik, mely a fibróma lefagyasztásával jár -

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALMA


1. A HeltiQ Skintags tartalma
2. Diagnosztizálás
3. Használati utasítás
4. A kezelést követően
5. Mellékhatások
6. Ellenjavallatok
7. Figyelmeztetések és óvintézkedések

1. A HELTIQ SKINTAGS TARTALMA

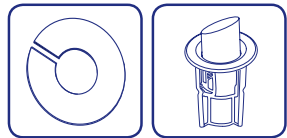

- 1 Aeroszol adagoló kupakkal, tartalma 38 ml dimetil-éter
- 1 Használati útmutató
- 8 Tapasz
- 8 Egyszer használatos eldobható, cserélhető fej

2. A FIBRÓMA DIAGNOSZTIZÁLÁSA

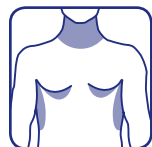

A fibrómát lógó szemölcsnek, bőrkínövésnek is nevezik, férfiaknál és nőknél egyaránt gyakran előfordul. A fibróma jóindulatú és nem fertőző. Spontán módon alakulnak ki, rendszerint a hónaljban, a nyak- és a torok környékén, vagy a mell alatt. A HeltiQ Skintags-et csak ezeken a testrészekon szabad használni.

A fibróma jellemzői:

- Bőrszínű
- Lágy, nem fájdalmas
- Könnyen mozgatható
- Kiáll a bőrből
- Rövid szára van



FIGYELEM!

Az esetek többségében az egyszeri kezelés elegendő a fibróma eltávolítására. Több, egymáshoz közeli fibróma meglétekor kezelje a fibrómákat egyenként, a kezelések között egy-egy nap szünetet tartva. Ha a fibróma két hét után is megmarad, ismételje meg a kezelést. Ne kezeljen egy fibrómát 4 alkalomnál többször. Minden egyes kezelés között el kell telnie legalább kettő hétnak. Amennyiben ez a kezelési mód nem vezet eredményre, ajánlatos orvosi tanácsot kérni.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ne vegye le a műanyag kupakot a nyomás alatt lévő aeroszolos adagolóról!



Ragassa le egy tapasszal a kezelendő fibróma környékét.



Helyezzen egy cserélhető fejet a kupak nyitott részéhez. Finoman nyomja be a cserélhető fejet a nyílásba. Tartsa az adagolót a nyílással lefelé. Ne helyezze a cserélhető fejet a fibrómára.



10 SEC

Aktiválja a flakont és a cserélhető fejet: nyomja meg négyszer erősen a hüvelykujjával az adagoló alját. Tartsa távol a testétől és ne irányítsa mások felé sem, akik a helyiségben tartózkodnak. A flakon tartalma a cserélhető fejbe folyik. Tartsa az adagolót lefelé még 10 másodpercig.



Tartsa a cserélhető fejet a tapasszal körülvett fibrómán 40 másodpercig.



A kezelés után közvetlenül távolítsa el a védőtapaszt.



Távolítsa el (húzza ki) a cserélhető fejet a kupakból, majd dobja ki.

Ne kezeljen egyidőben kettőnél több, egymáshoz közel lévő fibrómát. A cserélhető fej egyszer használható. Minden fibróma kezeléséhez új cserélhető fejet kell alkalmazni.

A használt cserélhető fej felületét ne érintse. Tartsa távol más bőrfelületektől. A használt cserélhető fejjel való érintkezés a bőr felületének fagyását okozhatja.

Használati útmutató HeltiQ Skintags



- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! - Csak külsőleg alkalmazható - Felnöttek és 4 éven felüli gyermekek részére - A fibróma kezelése krioterápiával történik, mely a fibróma lefagyasztásával jár -

4. A KEZELÉST KÖVETŐEN

- A kezelés közben vagy közvetlenül a kezelést követően enyhe fájdalmat vagy bizsergést érezhet, de ez hamarosan megszűnik. A kezelt bőrfelület kisebb duzzanata normális mellékhatása a krioterápiának
- A kezelés hólyagosodást okozhat, ebben az esetben kezelje normál hólyagként
- Távolítsa el a tapaszt, a kezelt területhez ne érjen hozzá, ne kapargassa
- Tartsa a kezelt területet tisztán, kerülje el a fertőzést
- Megengedett az úszás, zuhanyozás vagy fürdés. Ne dörzsölje a kezelt felületet
- A fibróma leesik, miután a kezelt felületen új, egészséges bőr képződött

5. MELLÉKHATÁSOK

A használati útmutató be nem tartása a bőrön fagyást, bőrkárosodást vagy hegesedést okozhat. A fagyás miatt a bőrön világos, vagy sötét foltok alakulhatnak ki. Ezt hypo- vagy hiperpigmentációnak nevezik, és egyik mellékhatása lehet a krioterápiának. Magasabb a kockázat, ha a terméket erősen pigmentált bőrön alkalmazza és/vagy nem tartja be a használati utasítást. Ha az útmutatónak megfelelően használja a terméket, ezek a foltok fokozatosan eltűnnek. Amennyiben nem tartja be a használati útmutató előírásait, termikus reakció, hypo- vagy hiperpigmentáció, bőrkárosodás vagy sebhely keletkezhet. Vegye fel a kapcsolatot orvosával fertőzés vagy komplikáció esetén.

6. ELLENJAVALLATOK

Ne használja a HeltiQ Skintags-t:

- Diagnosztizált rákbetegség, illetve kezelt rákbetegség esetén
- 4 mm-nél nagyobb fibrómára. A nagy fibrómák ezzel a módszerrel nem kezelhetők
- Ha a fibróma színe eltér a körülötte lévő bőr színétől
- Fenéken és anogenitális szemölcsökre
- Erősen pigmentált bőrre/ sötét pigmentált bőrre
- Ha a fibrómán szőrszál van
- Ha a fibróma kemény
- Ha a fibróma vérzik
- Irritált, fertőzött vagy érzékeny bőrre
- Hidegallergia (urticaria) vagy extrém hideggel szembeni érzékenység esetén (hideg típusú urticaria)
- Diabétesz vagy keringési zavarok (beleértve a Raynaud-szindrómát) esetén
- Immunszuppresszív gyógyszerekkel kezelt beteg, autoimmun vagy kollagén betegségek igazolt diagnózis esetén
- Véralvadást gátló (anticoagulációs) gyógyszert szedők és vérzékenységben (haemophiliában) szenvedők
- 4 év alatti gyermekeken
- HIV fertőzött pácienseken
- Más fibróma eltávolító kezelésekkel kombinálva
- Az arcon, mellkason, nyakon, mellen vagy fenéken lévő szemölcsökre

7. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A flakonban túlnyomás uralkodik, hő hatására felrobbanhat
- Gyermekektől elzárva tartandó
- A flakon tartalmát ne lélegezze be
- Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó
- Tilos a dohányzás
- Ne lyukassa ki, ne égesse el használat után sem
- Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni
- Napfénytől védve kell tárolni
- Ne tegye ki 50 °C / 122 °F-et meghaladó hőmérsékletnek
- Tárolja hűvös, száraz helyen, maximum szobahőmérsékleten
- A flakon elhelyezése hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően

Amennyiben Ön várandós vagy szoptat, használat előtt konzultáljon orvosával. Bármilyen kételye van, konzultáljon orvosával!

PANASZOK KEZELÉSE ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval.
www.skintag.eu



Since 1880

Gyártó:

Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega,
The Netherlands +31 (0)561 69 33 66
www.skintag.eu

Forgalmazó:

Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
1024 Budapest, Retek u. 32.
+36 (1) 438 - 0257
www.drkh.hu



0344